

# Micro-Sprint<sup>®</sup>

Микро-Спринт



*Самые маленькие брекетты*



**FORESTADENT<sup>®</sup>**  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# Большие возможности маленьких форм

Исходя из огромного клинического опыта специалисты компании Forestadent разработали серию брекетов «Спринт», включающую в себя брекеты трех размеров: «Спринт», «Мини-Спринт», «Микро-Спринт».

Все брекеты этой серии – монолитные. Нет сварки и нет риска коррозии металла. Оптимальный мезио-дистальный размер позволяет контролировать ротацию так же эффективно как обычный, полноразмерный брекет. Благодаря цветовой маркировке на дистальном щёчном крыле брекеты легко различимы.

Позиционирование упрощается за счёт ромбовидной формы брекета, а также за счёт маркировки центральной линии. Изогнутая форма площадки брекета повторяет естественный изгиб поверхности коронки зуба, что обеспечивает максимально прочную фиксацию без эффекта «раскачивания».


Закруглённые края паза брекетов серии «Спринт» имеют низкий коэффициент силы трения, что повышает эффективность лечения. Брекеты «Микро-Спринт», как и все брекеты этой серии, выполнены из материала высокой плотности и обладают идеально гладкой поверхностью, что значительно снижает возможность для скопления бактерий и уменьшает риск возникновения кариеса.



## Надежно держатся — легко снимаются

Компания Forestadent разработала уникальную анатомическую конструкцию площадки с насечками в виде крючкообразных выступов, расположенных под углом 45° друг к другу. Такая конструкция позволяет достигнуть максимального сцепления с поверхностью зуба даже несмотря на небольшую площадь. Фиксация более надежная, а снятие простое и безопасное по сравнению с брекетами «на сетке».

Снимать брекеты можно как традиционным способом, так и при помощи специальных щипцов, которые позволяют снять брекеты «Микро-Спринт» вместе с дугой. Для упрощения этой задачи у основания брекетов «Микро-Спринт» мезио-дистально сделаны скосы.

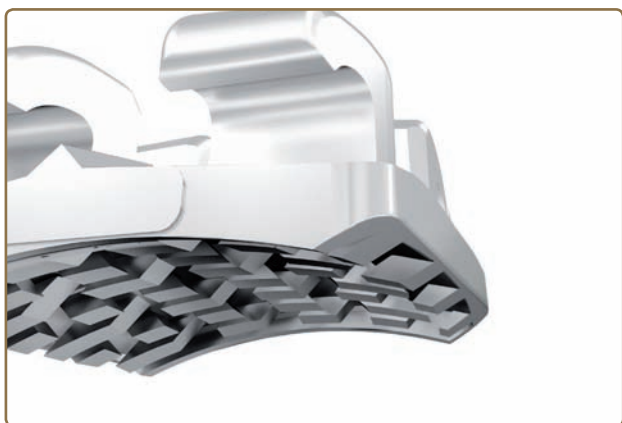



# БРЕКЕТЫ МИКРО-СПРИНТ

Компания Forestadent предлагает Вашему вниманию самые маленькие брекететы на рынке ортодонтии — Брекеты «МИКРО-СПРИНТ». Брекеты продолжают линейку популярных гипоаллергенных брекетов серии «СПРИНТ».


**Несмотря на свои миниатюрные размеры, брекететы «МИКРО-СПРИНТ» обладают всеми характеристиками полноразмерных брекетов.**

Брекеты «Микро-Спринт» компании Forestadent получили премию «Red Dot Design Award» в номинации «Дизайн-продукт 2013 г.»

«Red Dot Design Award» является авторитетным европейским конкурсом в области дизайна товаров широкого потребления. Данная награда присуждается производителям продукции, которые установили новые стандарты благодаря инновационным достижениям. Премия качества «Red Dot Design» подтверждает, что продукция является эксклюзивной, высокотехнологичной и опережает время.



*Брекеты серии Sprint\* (Спринт) в сравнении с брекетами других производителей*

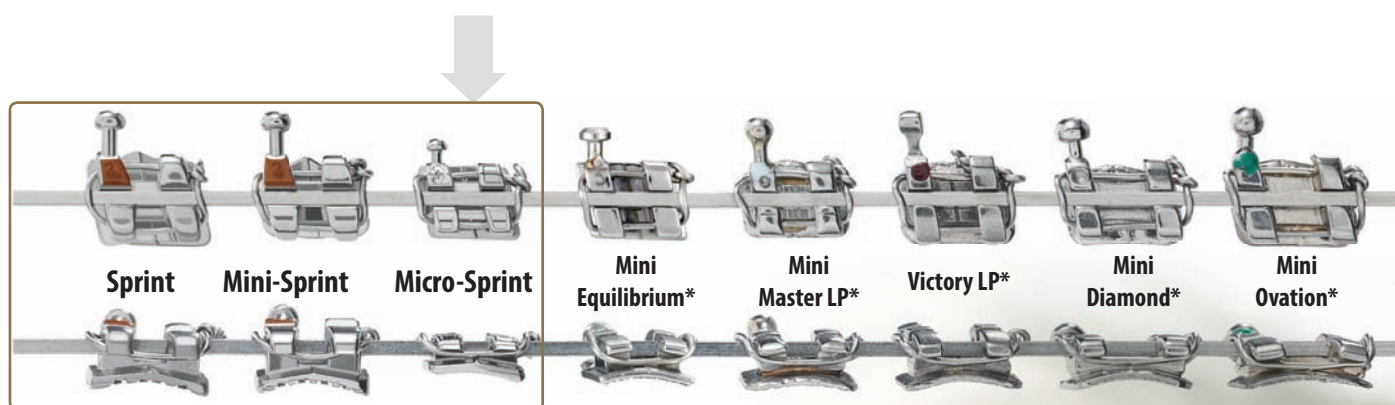

## Комфорт пациентов — основная задача

Пациенты нередко жалуются на чувство дискомфорта в процессе лечения. Однако далеко не каждый может позволить себе дорогостоящие керамические системы. На этом фоне брекететы «Микро-Спринт» могут стать хорошей альтернативой.

Высокая коррозионная стойкость и отсутствие никеля улучшают биосовместимость и снимают риск аллергической реакции. Края брекетов идеально сглажены, в результате чего их совершенно гладкая поверхность не травмирует слизистую пациента.



# Очевидные преимущества

## Сглаженные углы и полированная поверхность паза брекета

— снижение коэффициента трения




## Установочная вертикальная линия, цветовая маркировка

— точность и простота позиционирования

## Анатомический низкопрофильный крючок

— использование межчелюстных эластиков;

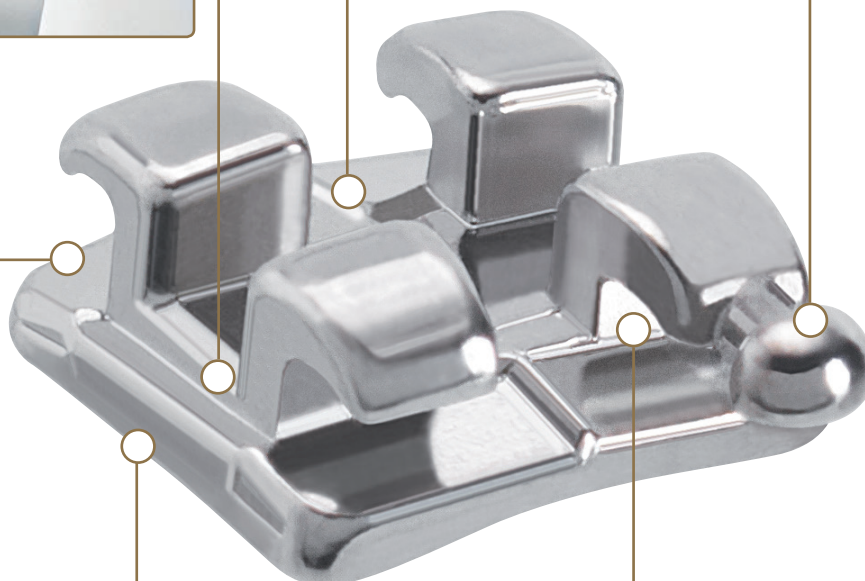

## Мезиодистальный размер

— как у полноразмерных брекетов;  
— контроль ротации и торка;

## Подкрыльное пространство

— использование эластичной или металлической лигатуры



## Запатентованное трехмерное основание брекета

в виде крючковидных выступов существенно улучшает качество фиксации по сравнению с сетчатым основанием.

## Простое, безопасное снятие брекетов


Специальные скосы основания на мезиальной и дистальной стороне

**Высокая коррозионная стойкость и отсутствие никеля улучшают биосовместимость и снимают риск аллергической реакции.**


# Цветовая маркировка



Система Roth

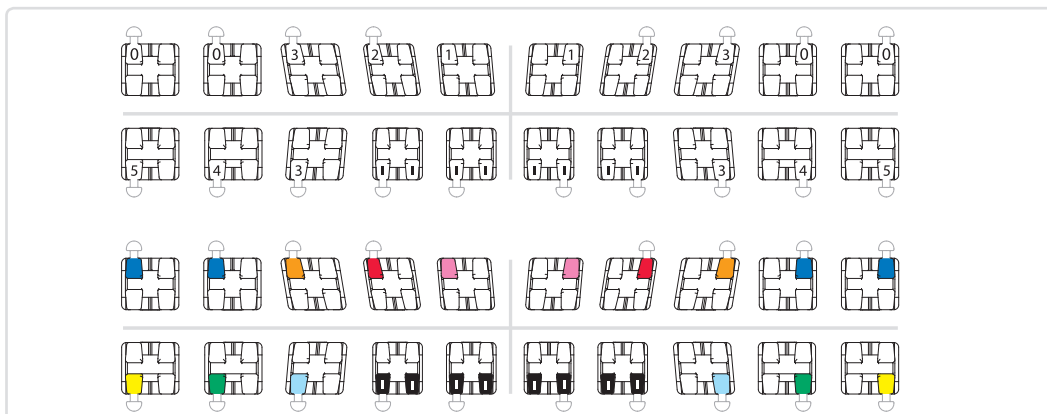

Система McLaughlin/Bennett/Trevisi

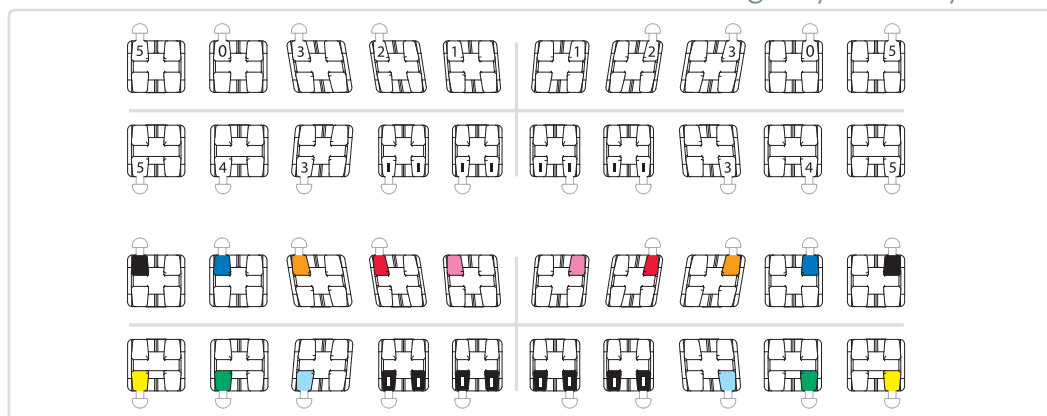

# Аксессуары

Номер		Кол-во в упаковке	Описание
655-0015		катушка (1,5 м)	Лингвальная эластичная цепочка, более плоская, чем обычная
501-0854		1	Щипцы для снятия брекетов Микро-Спринт
312-1001		1000	Лигатура металлическая Ø 0,2 мм, (.008")
659-0200	прозрачная	960	Эластичная лигатура — уменьшенная версия, идеальна для брекетов Микро-Спринт
659-0201	серая		
659-0202	черная		

+7 (495) 966-03-04  
www.pumpagroup.ru



# Брекеты Микро-Спринт



Верхняя челюсть					№ для заказа				
Зуб		Торк	Ангуляция	In/Out	Ротация	.018 Право	.018 Лево	.022 Право	.022 Лево
<b>1</b>	Центральный резец	+17°	+4°	0,8	–	778-0103	777-0103	778-0101	777-0101
		+12°	+5°	0,7	–	784-0103	783-0103	784-0101	783-0101
<b>2</b>	Боковой резец	+10°	+8°	1,0	–	778-0203	777-0203	778-0201	777-0201
		+8°	+9°	1,0	–	784-0203	783-0203	784-0201	783-0201
	Боковой резец с крючком	+10°	+8°	1,0	–	778-0213	777-0213	778-0211	777-0211
		+8°	+9°	1,0	–	784-0213	783-0213	784-0211	783-0211
<b>3</b>	Клык	-7°	+8°	0,5	–	778-0303	777-0303	778-0301	777-0301
		-2°	+11°	0,5	4° Мезиально	784-0303	783-0303	784-0301	783-0301
	Клык с крючком	-7°	+8°	0,5	–	784-0313	777-0313	778-0311	777-0311
		-2°	+11°	0,5	4° Мезиально	784-0313	783-0313	784-0311	783-0311
<b>4</b>	1-й премоляр	-7°	0°	0,5	–	778-0403	777-0403	778-0401	777-0401
		-7°	0°	0,5	2° Дистально	784-0503	783-0503	784-0501	783-0501
	1- премоляр с крючком	-7°	0°	0,5	–	778-0413	777-0413	778-0411	777-0411
		-7°	0°	0,5	2° Дистально	784-0513	783-0513	784-0511	783-0511
<b>5</b>	2-й премоляр	-7°	0°	0,9	–	778-0503	777-0503	778-0501	777-0501
		-7°	0°	0,5	2° Дистально	784-0503	783-0503	784-0501	783-0501
	2-премоляр с крючком	-7°	0°	0,9	–	778-0513	777-0513	778-0511	777-0511
		-7°	0°	0,5	2° Дистально	784-0513	783-0513	784-0511	783-0511

Нижняя челюсть					№ для заказа				
Зуб		Торк	Ангуляция	In/Out	Ротация	.018 Право	.018 Лево	.022 Право	.022 Лево
<b>1</b>	Центральный резец	-6°	0°	1,2	–	777-1203	777-1203	777-1201	777-1201
		0°	0°	1,2	–	783-1203	783-1203	783-1201	783-1201
	Центральный резец с крючком	-6°	0°	1,2	–	778-1213	777-1213	778-1211	777-1211
		0°	0°	1,2	–	784-1213	783-1213	784-1211	783-1211
<b>2</b>	Боковой резец	-6°	0°	1,2	–	777-1203	777-1203	777-1201	777-1201
		0°	0°	1,2	–	783-1203	783-1203	783-1201	783-1201
	Боковой резец с крючком	-6°	0°	1,2	–	778-1213	777-1213	778-1211	777-1211
		0°	0°	1,2	–	784-1213	783-1213	784-1211	783-1211
<b>3</b>	Клык	-6°	+3°	0,7	–	778-1403	777-1403	778-1401	777-1401
		-10°	+7°	0,7	2° Мезиально	784-1403	783-1403	784-1401	783-1401
	Клык с крючком	-6°	+3°	0,7	–	778-1413	777-1413	778-1411	777-1411
		-10°	+7°	0,7	2° Мезиально	784-1413	783-1413	784-1411	783-1411
<b>4</b>	1-й премоляр	-12°	+2°	0,7	–	778-1503	777-1503	778-1501	777-1501
		-17°	0°	0,7	4° Дистально	784-1503	783-1503	784-1501	783-1501
	1- премоляр с крючком	-12°	+2°	0,7	–	778-1513	777-1513	778-1511	777-1511
		-17°	0°	0,7	4° Дистально	784-1513	783-1513	784-1511	783-1511
<b>5</b>	2-й премоляр	-17°	+2°	0,7	–	778-1603	777-1603	778-1601	777-1601
		-22°	0°	0,7	4° Дистально	784-1603	783-1603	784-1601	783-1601
	2-премоляр с крючком	-17°	+2°	0,7	–	778-1613	777-1613	778-1611	777-1611
		-22°	0°	0,7	4° Дистально	784-1603	783-1603	784-1601	783-1601



Брекеты Микро-Спринт с эластичными лингвальными цепочками компании Forestadent



Брекеты Микро-Спринт с металлической лигатурой (слева) и эластичной (справа)