




**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# Улыбка

## МОЖЕТ ПОКОРИТЬ МИР.

Представляем Вам линейку брекетов Quick  
с металлическим лигирующим механизмом



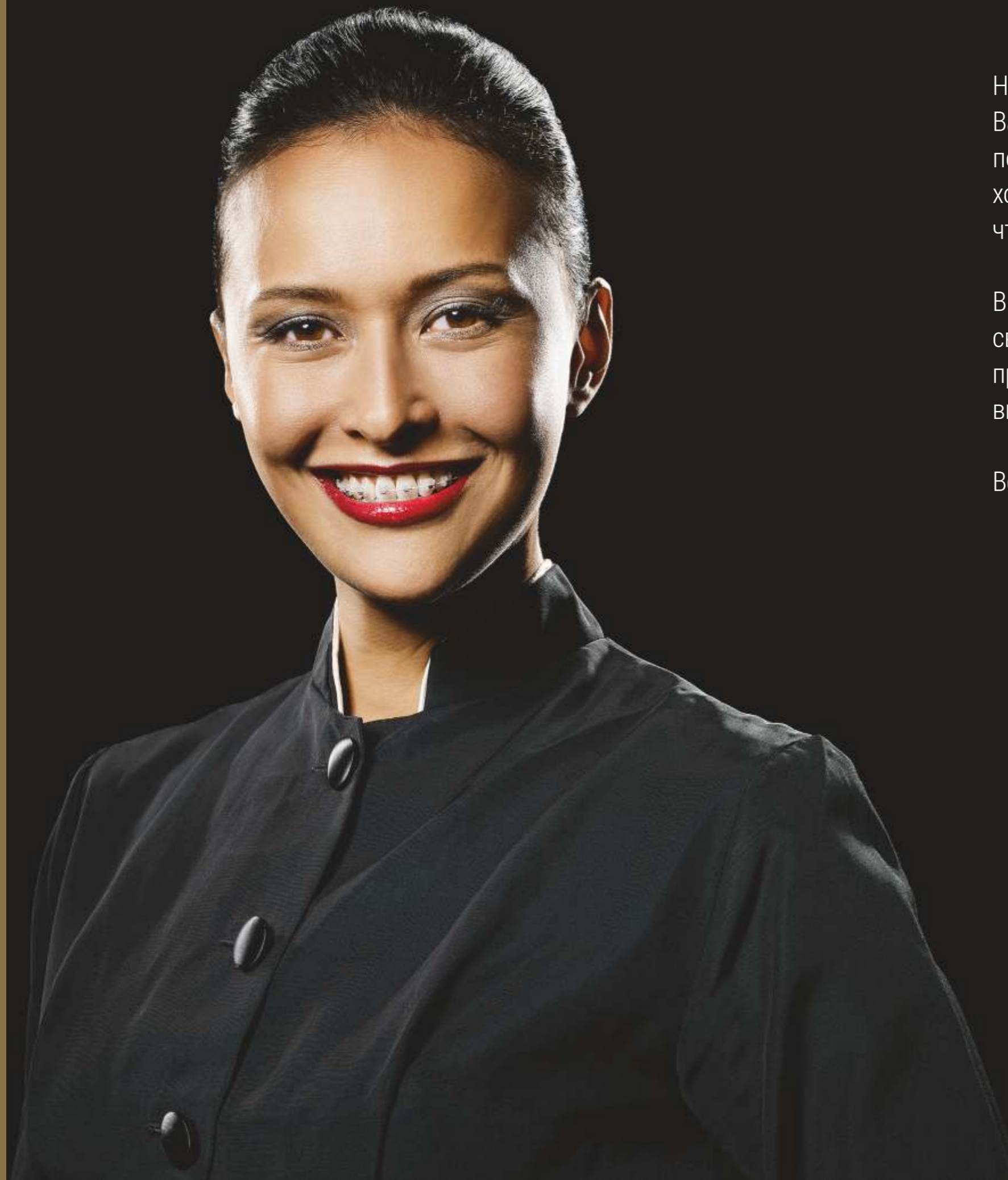

Наступил момент, который Вы так долго ждали. Вам нужно сделать всего лишь один шаг, чтобы почувствовать его. Уверенно, дружелюбно и с хорошим настроением. Сияющая улыбка – это все, что нужно, чтобы весь мир оказался у Ваших ног.

Вы не просто проводите ортодонтическое лечение своих пациентов. С Вашей помощью пациенты преображаются, производя неизгладимое впечатление на окружающих.

Всегда и везде.

**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



QuickKlear®  
с металлической клипсой



BioQuick®



# Совершенство для безупречной внешности

Разработка и совершенствование самолигирующих брекетов занимают годы. Используя активные металлические брекеты BioQuick®, которые сейчас выпускаются в абсолютно новом, низкопрофильном исполнении, Вы можете доверять нашему опыту так же, как и при использовании пассивных брекетов BioPassive® и керамических брекетов QuickKlear® с металлической клипсой. Благодаря запатентованным инновациям, максимальной точности и знаменитому качеству продукции под маркой «Сделано в Германии», Ваши пациенты приобретут идеальную улыбку.

Чтобы сделать это возможным, мы производим наши самолигирующие брекеты по сложной высокоинтеллектуальной технологии литья под давлением. Мы провели исследование 4 000 зубов для того, чтобы обеспечить оптимальное прилегание основания брекета к зубам любой формы. С каждым новым поколением брекетов мы продолжаем их совершенствование, чтобы Вы могли точно удовлетворять запросы всех Ваших пациентов.

*У Вас тоже будет повод улыбнуться.*

 **FORESTADENT**®  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Иногда меньшее,  
ощущается как **большее**

BioQuick LP. Новинка: теперь с более низким профилем и лучшим прилеганием.

Брекеты BioQuick® LP – это четвертое поколение нашей успешной линейки брекетов Quick, которые благодаря своему низкому профилю (англ. low profile, LP) меньше по высоте в области передних зубов, чем все предыдущие поколения брекетов. Все это гарантирует пациенту непревзойденный комфорт в процессе лечения.

- Уменьшенная высота: брекет передних зубов на 0,3 мм меньше по высоте, поэтому брекет верхних и нижних зубов (3-3) выглядят заметно менее рельефными.
- Оптимальное прилегание: основание брекета BioQuick® LP в очередной раз усовершенствовано для большей эффективности. Вы будете приятно удивлены, насколько легко можно зафиксировать брекет с обновленным основанием.
- Новый зажим: более мощный и широкий. Сила, удерживающая дугу в пазе, увеличена на 20%, что позволяет еще лучше контролировать торк, ангуляцию и ротацию.
- Легкость манипуляций: оптимизированная конструкция брекета с дополнительным гингивальным пазом большего размера для более легкого открытия брекета с десневой стороны.
- Удобство: брекет моляров BioQuick® в отличие от закрытых щечных трубок снабжены зажимом, что позволяет проводить лечение значительно легче, а значит, быстрее.



**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# Основные наиболее важные преимущества

## Мощный зажим

Более мощный и широкий зажим, который при необходимости можно заменить, с функцией защелки

## Комфорт

Закругленные края брекета и паза для большего комфорта в полости рта

## Дополнительный паз

Благодаря специальному дополнительному пазу размером .016x.016 можно легко и быстро установить дополнительные приспособления

## Возможность открывания с десневой стороны

Дополнительная возможность открывания клипсы с десневой стороны

## Аккуратность в работе

Выпуклый контур основания препятствует утечке адгезива

## Точное и быстрое перемещение зубов

Четыре контактные точки паза уменьшают трение и исключают заклинивание дуги

## Монолитный корпус

запатентованные крючкообразные выступы на основании брекета обеспечивают надежную фиксацию

## Основание брекета

Благодаря измененному, анатомически адаптированному основанию брекета, позиционирование становится действительно приятной работой

# НЕЗАМЕТНЫЙ способ привлечь внимание

Брекеты QuicKlear® с металлической клипсой. Быстрые и незаметные.

Эти полупрозрачные керамические брекететы являются отличным дополнением к нашей системе Quick, предлагая эстетическую альтернативу, которая привлекает минимум внимания. Пациенты могут носить эти брекететы, будучи уверенными в себе. Им не придется проводить много времени в Вашей клинике, поскольку проверенный временем лигирующий механизм зажима брекетов гарантирует, что прием всегда будет проведен быстро. И это еще один повод для яркой улыбки.

- Полупрозрачная керамика: собственная разработка, привлекает меньше внимания.
- Специальный зажим: благодаря специальному процессу обработки поверхности зажим из кобальт-хромового сплава не блестящий, а матовый, а значит – менее заметный.
- Удобство: зажим легко открывается специальным инструментом и закрывается нажатием пальца, обеспечивая простоту манипуляций.
- Надежная фиксация: благодаря основанию с крючкообразными выступами, которое мы разработали специально для керамических брекетов, брекет QuicKlear® с металлической клипсой прочно связывается с зубом.
- Оптимальное прилегание: на базе исследования 4000 зубов основание брекетов было разработано таким образом, чтобы обеспечить оптимальное прилегание к зубам любой формы.
- Аккуратное снятие: при помощи инструмента Pauls-Tool брекет можно снять без риска его повреждения.




**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# Волшебная улыбка

Брекеты BioPassive®.  
Трение меньше,  
результат быстрее.

# улыбка

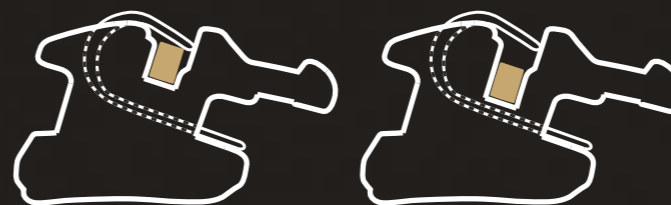


активные BioQuick® LP

пассивные Quick®

При использовании пассивной версии наших самолигирующих брекетов контролируемые силы и низкое трение действуют уже в фазе нивелирования, чтобы достичь как можно более быстрой коррекции положения зубов. Это брекет с низким расположением паза для предоставления большего пространства для дуги, что приводит к меньшему трению.

- Эффективные и быстрые: конструкция пассивных брекетов в сочетании с гибким зажимом обеспечивает быстрый прогресс в лечении.
- Сильный союз: Брекеты BioQuick® LP и BioPassive® имеют дополнительный паз, что позволяет использовать многочисленные дополнительные приспособления для ускорения получения результата.
- Оптимальное прилегание: на базе исследования 4000 зубов основание брекетов было разработано таким образом, чтобы обеспечить оптимальное прилегание к зубам любой формы.
- Надежная фиксация: монолитный корпус брекета с запатентованным крючкообразным основанием.
- Удобство: с брекетами для моляров BioPassive® особенно легко работать.

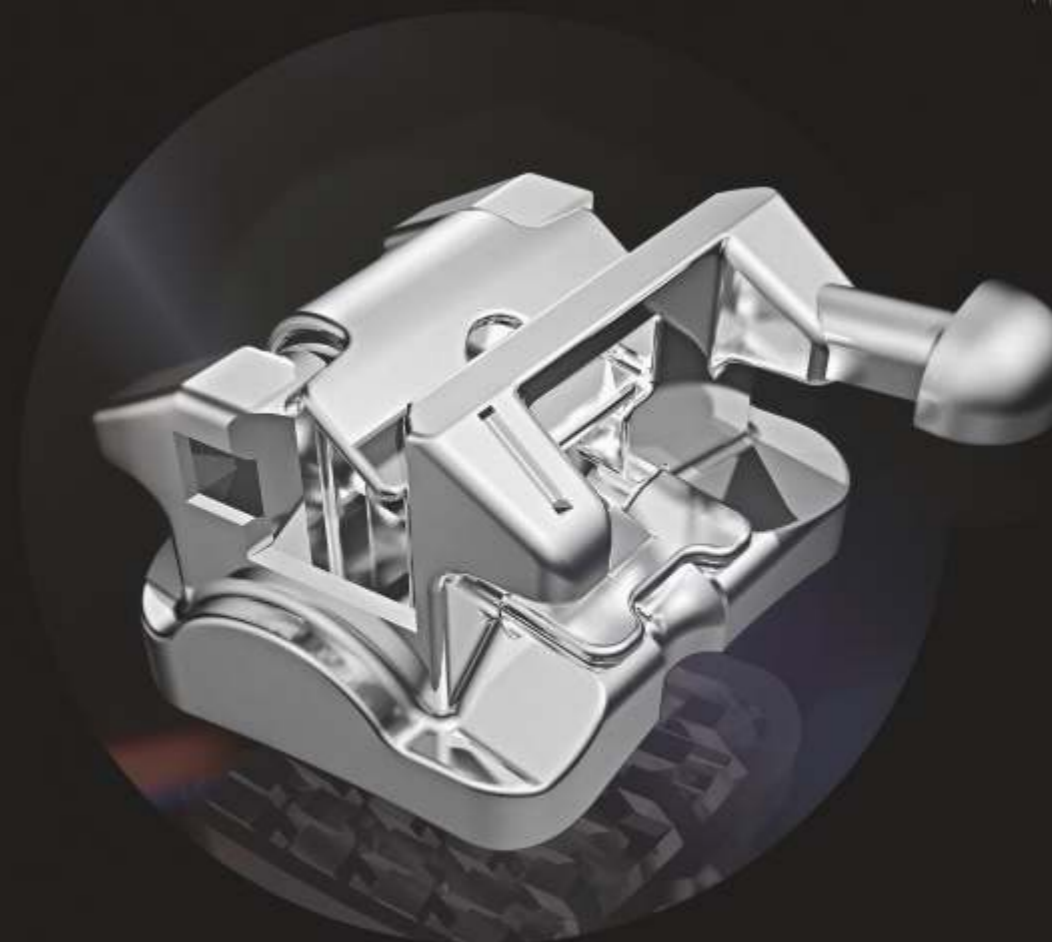

**FORESTADENT®**  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



# Что Вы предпочитаете?

## Новые инструменты для надежного открывания.

Все брекет системы Quick можно открыть или с вестибулярной, или с десневой стороны. Во избежание какого-либо ущерба Вам, в идеале, следует использовать только инструменты, специально созданные для данной цели.

Выпускаются три различных инструмента, способные удовлетворить любые потребности.

Оригинальный специальный инструмент для открывания брекетов идеально приспособлен для вестибулярного и десневого открывания. У него два одинаково изогнутых конца и его можно использовать с любыми как керамическими, так и металлическими брекетами Quick.

Кроме вестибулярного открывания, с новым инструментом для открывания брекетов с фланцем у Вас есть два варианта десневого открывания: вставить инструмент под прямым углом в гингивальный паз брекета или вставить его противоположный конец под наклоном. Инструмент пригоден для работы с металлическими брекетами Quick.

Этот новый инструмент дает дополнительную возможность открывать паз брекета вращательным движением. Один конец инструмента предназначен для вестибулярного открывания брекетов вращательным движением. Преимущество: приложенная сила остается внутри системы тело брекета/зажим, обеспечивая пациенту высшую степень комфорта. Второй конец этого инструмента аналогичен изогнутой рабочей части инструмента для открывания брекетов с фланцем. Инструмент пригоден для работы с металлическими брекетами Quick.

Информация о том, как правильно использовать инструменты, размещена на нашем веб-сайте [www.pumragroup.ru](http://www.pumragroup.ru)



Инструмент для открывания металлических и керамических брекетов Quick.



Инструмент для открывания металлических брекетов Quick, с фланцем



Инструмент для открывания брекетов Quick


 **FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



# Одна проблема: нет проблем.

## Самолигирующие брекеты со сменной клипсой.

Конечно, клипса брекета может повредиться. Это не проблема: ее можно просто заменить и продолжить использовать брекет. Информация о том, как именно это сделать, размещена на нашем веб-сайте [www.rimpragroup.ru](http://www.rimpragroup.ru). Это так же легко, как запустить видеоролик щелчком мыши (замена клипсы рекомендуется только для металлических брекетов).

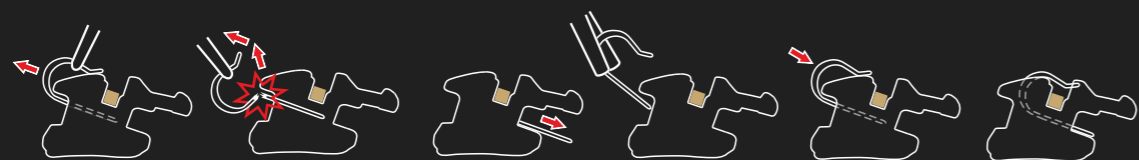

## Единственные самолигирующие брекеты с инструментом Pauls-Tool


Брекеты QuicKlear® можно легко снять инструментом Pauls-Tool без повреждения самого брекета и эмали зуба. Очевидно, что это всегда удобно, когда лечение закончено. Однако, даже если Вы хотите перепозиционировать брекет во время лечения, это можно сделать следующим образом: приложите инструмент Pauls-Tool к брекету, снимите брекет, наклонив его в мезиальном или дистальном направлении, выполните пескоструйную обработку основания брекета и зафиксируйте снова. Новый брекет? К сожалению, он Вам не понадобится.



**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# Лучшее сочетание для идеальной коррекции.

Применение разумной сегментарной техники.

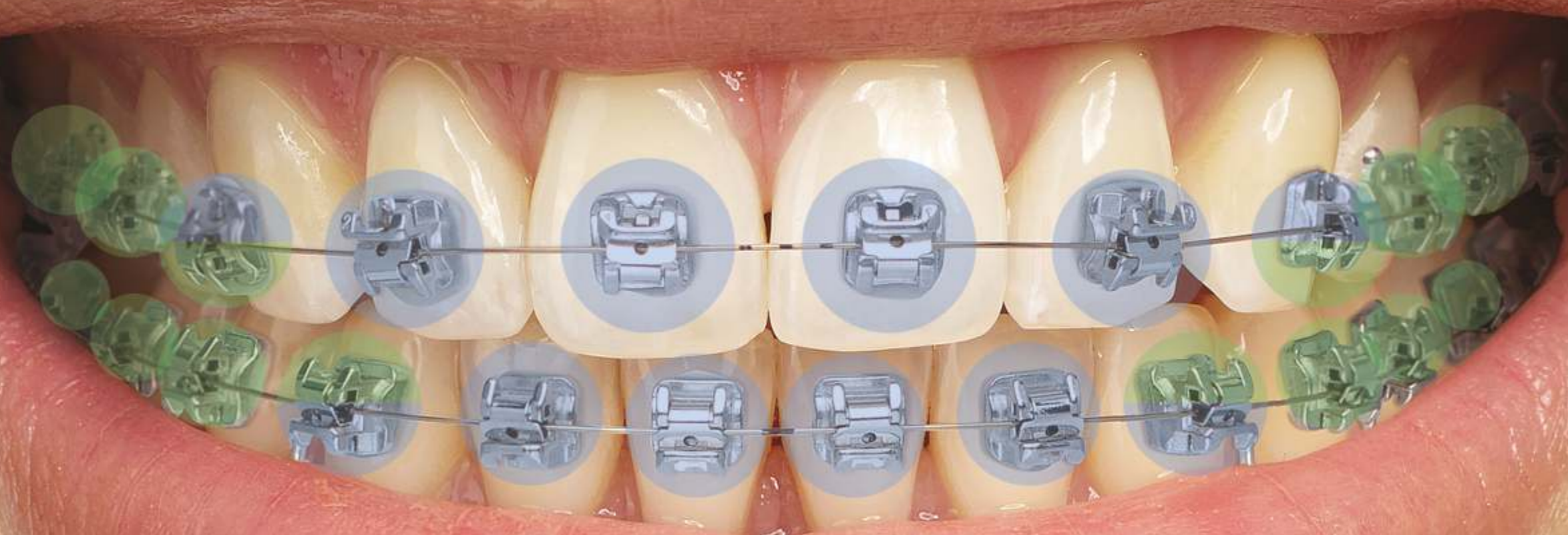

Все брекет системы семейства Quick могут прекрасно сочетаться друг с другом, тем самым позволяя Вашим пациентам быстро и комфортно получать весьма впечатляющий эстетический результат. Воспользуйтесь этими преимуществами в полной мере, например: при использовании сегментарной техники можно сочетать активные брекет системы BioQuick LP во фронтальном сегменте и пассивные брекет системы BioPassive в боковых сегментах и на молярах. В конце концов, что может быть лучше довольных пациентов, уверенных в том, что Вы предоставляете им все самое лучшее и передовое? На всякий случай, если Вы еще не знаете, сообщаем, что такая техника уже реализована в нашей прописи [SMILE](#).

**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

# Совершенны, как сами брекететы: дуги Bio от FORESTADENT.

Применимы во всех фазах лечения любого пациента.

Если Вы работаете с очень высококачественными брекетами, необходимо использовать и дуги соответствующего качества: с этой целью FORESTADENT предлагает широкий выбор дуг для всех фаз лечения, помогая Вам быстро и надежно достичь цели.

При правильном подборе дуг во всех фазах лечения на зубы действуют правильные силы. Благодаря «умному» никель-титановому сплаву NiTi дуги сочетают очень стабильную форму с суперэластичностью. Это очень эффективно во время лечения и при этом очень комфортно для пациента.

Уникальная гладкая поверхность значительно снижает износ, возникающий при взаимодействии дуги с пазом брекета, что, в свою очередь, снижает трение.

Более того, термочувствительность дуг Bio делает лечение более комфортным для пациентов. При потреблении холодной пищи или напитков они могут, если пожелают, иногда получить короткую передышку из-за ослабления напряжения дуги.

Это значит, что наши дуги адаптируются именно к Вашим требованиям, а также к потребностям Ваших пациентов, обеспечивая идеальный результат для всех.

- Различные варианты дуг BioStarter® имеют круглое сечение, они идеальны в качестве начальных дуг. Для особенно чувствительных пациентов выпускаются даже дуги размером 0.010".
- BioTorque® - эффективные прямоугольные дуги для применения во всех трех измерениях.
- BioFinisher® - прямоугольные дуги для идеального завершения случаев.
- BioCosmetic® - впечатляющие дуги цвета самих зубов, остающиеся белыми благодаря покрытию из медицинского тефлона (эти дуги выпускаются и круглой, и прямоугольной формы).





Мы в **FORESTADENT** постоянно инвестируем в исследования и разработки, чтобы иметь возможность предложить вам и вашим пациентам продукцию, которая делает лечение быстрым, безопасным и, конечно же, комфортным. Вы можете доверять нашему качеству под маркой «Сделано в Германии» для создания красивых улыбок во всем мире.



### Система SMILE стартовые наборы

- Металлические брекеты BioQuick на ВЧ+НЧ\* или керамические брекеты QuickClear с металлической клипсой + металлические брекеты BioQuick на ВЧ+НЧ\*
- Дуги BioStarter .012 на ВЧ + НЧ
- Модель брекета BioQuick или модель брекета QuickClear с металлической клипсой (10:1)
- Инструмент для установки дуг
- Инструмент для открывания брекетов
- Типодонт с брекетами в прописи SmileRX
- Стопора (50 шт.)

\*Наборы брекетов доступны в прописи SmileRX для 3 или 6 пациентов соответственно



### Стартовый набор брекетов QuickClear с металлической клипсой

- Брекеты QuickClear с металлической клипсой на ВЧ+НЧ\*
- Дуги BioStarter .012" на ВЧ + НЧ
- Модель брекета QuickClear с металлической клипсой (10:1)
- Инструмент для установки дуг
- Инструмент для открывания брекетов
- Типодонт с брекетами
- Стопора (50 шт.)

\*Наборы брекетов доступны в прописях Roth .018", .022", MBT .022" для 3 или 6 пациентов соответственно



### Стартовый набор металлических брекетов BioQuick

- Брекеты BioQuick на ВЧ+НЧ\*
- Дуги BioStarter .012" на ВЧ + НЧ
- Модель брекета BioQuick (10:1)
- Инструмент для установки дуг
- Инструмент для открывания брекетов
- Типодонт с брекетами
- Стопора (50 шт.)

\*Наборы брекетов доступны в прописях Roth .018", .022", MBT .022" для 5 или 10 пациентов соответственно

**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



Инструмент для открывания металлических и керамических брекетов Quick



Инструмент для открывания металлических брекетов Quick, с фланцем



Инструмент для установки дуг



Инструмент для открывания брекетов Quick



Инструмент Pauls-Tool для снятия керамических брекетов



Щипцы для снятия брекетов



+7 (495) 966-03-04

[www.pumpagroup.ru](http://www.pumpagroup.ru)